



Confidence in posture solutions

# Clematis®



Qualité et confort reconnus



Yes, you can.®

Chez Invacare, nous comprenons que chaque individu est différent et que les utilisateurs ont des besoins spécifiques lorsqu'il s'agit de choisir leur fauteuil. Nous comprenons également que les institutions (EHPAD) attendent de leurs fauteuils qu'ils soient réglables, notamment en largeur au niveau des accoudoirs et des repose-jambes. Dans le but d'offrir un bon positionnement et un équilibre optimal, nous savons qu'une inclinaison d'assise est essentielle.

Le *Rea Clematis* est une réponse à toutes ces attentes ! Ses multiples réglages, son design, sa fiabilité et les bénéfices qu'il apporte à l'utilisateur en font un fauteuil connu et reconnu.

### Assise multiréglable

La version du **Clematis** Stock profite en série d'un réglage en largeur des accoudoirs et des repose-jambes. Ce réglage qui s'effectue sans outil grâce à des manettes indéchables, et qui s'ajoute au réglage de la profondeur d'assise, permet d'ajuster l'assise aux dimensions de l'utilisateur.

### Inclinaison à compensation

La conception de ce fauteuil avec le point de pivot du siège sous le bassin et le point de pivot des repose-jambes au niveau de celui des genoux permet de conserver un bon positionnement optimal de la personne. L'inclinaison d'assise permet de faire varier les points de pression du corps et favorise ainsi la prévention des escarres.

## Caractéristiques et Options



### Réglages de l'assise en largeur

Permet d'augmenter la largeur entre accoudoirs de + 40 mm et la largeur entre repose-jambes de + 100mm.



### Repose-jambes

Plus robustes et plus réglables : mécanisme de réglage en angle renforcé, nouveau support d'appui-mollets, un seul tube porte-palette qui couvre toutes les longueurs UL et une nouvelle palette réglable en angle, en profondeur et en largeur.

## Données techniques


Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largueur d'assise	Profondeur d'assise	Hauteur d'assise	Hauteur du dossier	Hauteur des accoudoirs	UL	Bascule d'assise	Largueur hors-tout
<i>Rea Clematis</i>	390/440/490 <sup>1</sup> / 390-430 / 440-480 / 490-530 mm	420 - 480 mm	400 - 450 mm	600 - 710 mm	230 - 340 mm	362 - 627 mm	-1° à + 19°	Largueur d'assise + 210 mm
	Hauteur hors-tout	Largueur hors-tout avec potence	Inclinaison de dossier	Poids max. utilisateur	Poids de transport	Poids du fauteuil	Dimensions de transport <sup>3</sup>	Pente max. d'utilisation de freins de stationnement
<i>Rea Clematis</i>	960 - 1120 mm	1120 - 1495 mm	-1° à + 30°	125 kg	20,5 / 21 / 21,5 <sup>2</sup>	30 / 32 / 33,5 kg		7°

- Rea Clematis* largeur fixe
- Poids sans appui-nuque, sans accoudoirs, sans coussin, sans repose-jambes, sans cale-tronc, sans roues arrière.
- Largueur 390 (h 595 x L 840 X 585 mm), Largueur 440 (h 595 x L 840 X 635 mm), Largueur 490 (h 595 x L 840 X 685 mm)


### Coloris du châssis

Gris perle

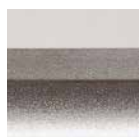

### Revêtement du siège

Dartex noir TR26

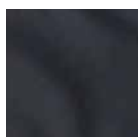

Crash testé ISO 7176-19