

Action^{®1} R



Robuste, fonctionnel et simple



Yes, you can.®

Action' R est un fauteuil conçu avec un châssis en acier ce qui lui confère une solidité importante. Ce fauteuil est robuste et simple d'utilisation et équipé d'un dossier fixe.

Disponible dans deux versions : propulsion manuelle avec roues arrière 24", propulsion manuelle avec roues arrière 24" et freins tambour tierce-personne. Avec ses six largeurs d'assise disponibles, de 380 mm à 505 mm par pas de 25 mm, vous trouverez facilement la taille correspondant à vos besoins. Les accoudoirs sont relevables et facilement amovibles grâce à un système de déverrouillage permettant ainsi de le stocker et de le transporter plus aisément. Enfin, les manchettes d'accoudoir sont réglables sur deux positions : courte et longue. **Action' R** bénéficie des caractéristiques principales suivantes :

- **Disponible en six largeurs d'assise et en trois versions**
- **Fonctionnalité et confort**
- **Facile à transporter grâce à ses éléments amovibles**
- **Une qualité et une fiabilité reconnues comme sur l'ensemble de la gamme Action**

Caractéristiques et options

Les accoudoirs relevables et amovibles permettent d'améliorer les transferts et de réduire l'encombrement pour le transport. La forme spécifique des accoudoirs permet d'avoir une largeur hors-tout maîtrisée qui est égale à la largeur d'assise + 195 mm. Les manchettes d'accoudoir offrent désormais deux positions : courte et longue.



Qualité et durabilité

S'appuyant sur des années d'expérience et sur une technologie ayant déjà fait ses preuves qui fait le succès de la gamme **Action**, **Action' R** est un fauteuil robuste et durable sur lequel vous pourrez compter.

Repose-jambes Standard

Sa structure en acier et son mécanisme robuste du réglage en angle lui confère une grande solidité. Son articulation inclut un point de pivot à compensation.

Version freins tambour


Action' R est disponible dans une version freins tambour de série qui offre un maximum de contrôle pour la tierce-personne.

Roulettes anti-bascule


Offre une sécurité maximale dans les pentes.

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

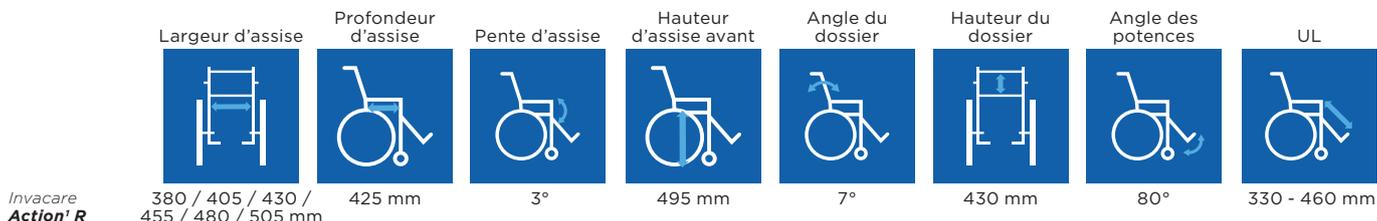

Invacare
Action' R

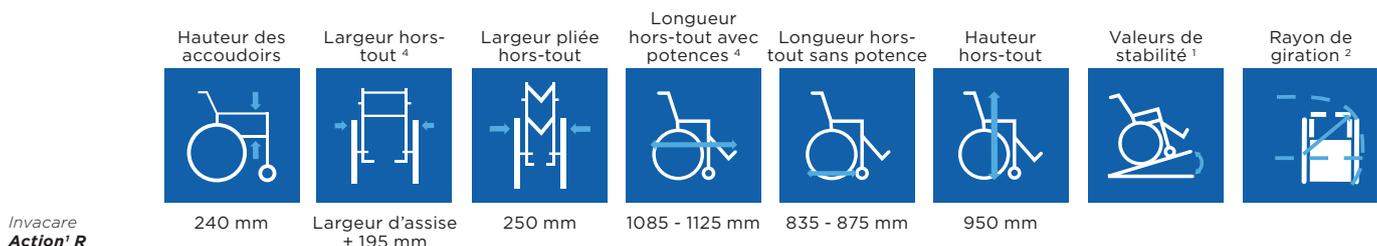

Invacare
Action' R



Invacare
Action' R

1. Valeurs de stabilité

Pente maximale d'utilisation de freins de stationnement : 7°
Stabilité statique en arrière : 18°
Stabilité statique en avant : 9°
Stabilité statique latérale : 16,8°

2. Rayon de giration

Rayon de giration minimum : 915 mm
Largeur de pivot : 1280 mm


3. Dimensions fauteuil plié

Hauteur : 735 - 950 mm
Profondeur : 1025 mm
Largeur : 225 mm

4. Dimensions hors-tout

Dans certaines configurations la largeur ou la longueur hors-tout excèdent les limites autorisées, et l'accès aux sorties de secours n'est plus possible.

Coloris du châssis

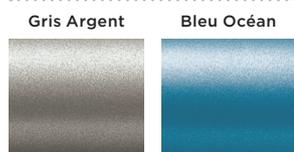

Revêtement du siège



Les couleurs peuvent légèrement varier de celles présentées dans cette brochure.



Ce fauteuil ne doit pas être utilisé comme siège dans un véhicule à moteur.